



Vermoeide Ogen


- Beschermde de ogen bij overbelasting door intensief beeldschermgebruik
- Bij overbelaste, vermoeide en brandende ogen door intensief beeldschermgebruik
- Met 0,1% hyaluronzuur en 0,5% extract van blauwe bosbes van natuurlijke oorsprong
- Geschikt voor contactlenzdragers
- Bevat geen conserveermiddelen

Similasan Vermoeide Ogen oogdruppels beschermen de ogen bij overbelasting door intensief beeldschermgebruik. De oogdruppels verlichten klachten zoals overbelaste, vermoeide, droge of brandende ogen veroorzaakt door langdurige blootstelling aan blauw licht dat wordt afgegeven door digitale apparaten zoals mobiele telefoons, tablets of computerschermen.

Indicaties:

- ideaal bij overbelaste ogen veroorzaakt door langdurig computergebruik, blootstelling aan blauw licht, ongunstige lichtomstandigheden of 's nachts tijden
- dagelijkse smering en hydratatie van droge en vermoeide ogen als gevolg van intensief beeldschermgebruik
- beschermt het oog en stabiliseert de traanfilm bij oxidatieve stress en ophoping van vrije radicalen op het oogoppervlak
- geschikt voor gebruik tijdens het dragen van contactlenzen.

Gebruiksaanwijzing:

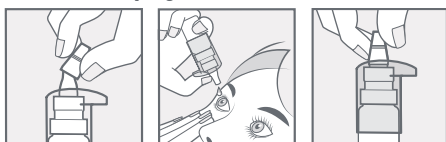

Druppel 1 tot 2 druppels per oog, één of meerdere keren per dag, indien nodig of volgens het advies van uw dokter, apotheker of drogist.

Voor contactlensgebruikers: druppel 2 tot 3 druppels op de lens voor of na het dragen (druppel meerdere keren per dag of indien nodig op de gedragen lens).

Verwijder volgens de plaatselijke wetgeving.

Waarschuwingen:

- bij oogirritatie stop het gebruik van het product en neem contact op met een dokter, apotheker of drogist
- niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid aan een van de productcomponenten
- verwijderd houden van warmtebronnen, bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C
- buiten het bereik van kinderen houden
- niet doorslikken
- gebruik het product niet meer na de vervaldatum
- binnen 6 maanden na de eerste opening gebruiken
- gebruik het product niet als de fles beschadigd lijkt
- laat de punt van de fles geen contact maken met uw oog of ooglid
- sluit de fles na elk gebruik goed af
- dien het product ten minste 5 minuten voor of na de toediening van andere plaatselijke oogheelkundige producten toe.

Samenstelling:

Natriumhyaluronaat 0,1%, vloeistofextract van blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus L.*) 0,5%, dinatriumedetaat, isotone oplossing gebufferd tot pH 7,2.

Bevat geen:

Benzalkoniumchloride, chloorhexidine, parabenen, fenoxylethanol, thimerosal en componenten van dierlijke oorsprong.



Distributeur:

Similasan Nederland B.V.
Toernooiveld 200
6525 EC Nijmegen
Netherlands
www.mysimilasan.com



Yeux Fatigués

- Protège les yeux en cas de stress dû à l'usage intensif des écrans
- En cas de stress, fatigue et sensation de brûlure des yeux dus à l'usage intensif des écrans
- Avec 0,1% d'acide hyaluronique et 0,5% d'extrait de myrtille d'origine naturelle
- Convient aux porteurs de lentilles de contact
- Sans conservateur


Les gouttes pour les yeux Similasan Yeux Fatigués protègent les yeux en cas de stress dû à l'usage intensif des écrans.

Ces gouttes pour les yeux soulagent les symptômes tels que les yeux stressés, fatigués, secs ou qui brûlent en raison d'une exposition prolongée à la lumière bleue émise par les appareils numériques tels que les téléphones portables, les tablettes ou les écrans d'ordinateur.

Indications:

- idéal en cas de stress oculaire causé par l'utilisation prolongée d'un ordinateur, l'exposition à la lumière bleue, des conditions d'éclairage défavorables ou la conduite de nuit
- lubrification et hydratation quotidiennes des yeux secs et fatigués par l'usage intensif des écrans
- protège l'œil et stabilise le film lacrymal en cas de stress oxydatif et d'accumulation de radicaux libres sur la surface de l'œil
- convient au port de lentilles de contact.

Mode d'emploi:

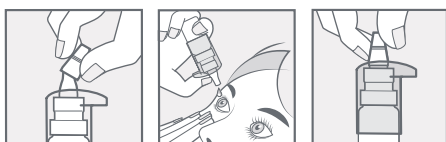

Instiller 1 à 2 gouttes par œil une ou plusieurs fois par jour, selon les besoins ou selon l'avis de votre médecin, pharmacien ou droguiste.

Pour les porteurs de lentilles de contact:

instiller 2 à 3 gouttes sur la lentille avant ou après utilisation (instiller des gouttes sur la lentille portée, plusieurs fois par jour ou selon les besoins). Éliminer conformément aux réglementations locales.

Mises en garde:

- en cas d'irritation des yeux, cesser d'utiliser le produit et contacter un médecin, un pharmacien ou un droguiste
- ne pas utiliser en cas d'allergie ou d'hypersensibilité à l'un des composants du produit
- conserver à l'écart des sources de chaleur, dans un endroit sec à des températures comprises entre 5 et 35 °C
- tenir hors de portée des enfants
- ne pas avaler
- ne pas utiliser le produit après la date d'expiration
- utiliser dans les 6 mois suivant la première ouverture
- ne pas utiliser le produit si le flacon semble endommagé
- ne pas laisser l'embout du flacon toucher l'œil ou la paupière
- bien refermer le flacon après chaque utilisation
- administrer le produit au moins 5 minutes avant ou après l'administration d'autres produits ophtalmiques topiques.

Composition:

hyaluronate de sodium 0,1%, extrait fluide de myrtille (*Vaccinium myrtillus L.*) 0,5%, édétate disodique, solution isotonique tamponnée à pH 7,2.

Exempt de:

chlorure de benzalkonium, chlorhexidine, parabènes, phénoxyéthanol, thimerosal et composants d'origine animale.



Distributeur:

Similasan Nederland B.V.
Toernooiveld 200
6525 EC Nijmegen
Netherlands
www.mysimilasan.com


Similasan
Müde Augen


- Schützt die Augen bei Stress durch intensive Bildschirmarbeit
- Bei gestressten, müden und brennenden Augen bei intensiver Bildschirmarbeit
- Mit 0,1 % Hyaluron und 0,5 % Blaubeer-Extrakt natürlichen Ursprungs
- Für Kontaktlinsenträger geeignet
- Ohne Konservierungsmittel

Similasan Müde Augen Augentropfen schützen die Augen bei Stress durch intensive Bildschirmarbeit. Die Augentropfen lindern Symptome wie gestresste, müde, trockene oder brennende Augen, wenn diese lange blauem Licht ausgesetzt sind, das von digitalen Geräten wie Smartphones, Tablets und Computerbildschirmen abgegeben wird.

Anwendungsgebiete:

- ideal bei gestressten Augen aufgrund von langanhaltender Computernutzung, Exposition gegenüber Blaulicht, ungünstigen Lichtverhältnissen oder Autofahren bei Nacht
- tägliche Benetzung und Befeuchtung von trockenen und müden Augen bei intensiver Bildschirmarbeit
- schützt das Auge und stabilisiert den Tränenfilm bei oxidativem Stress und der Ansammlung freier Radikale auf der Augenoberfläche
- können mit Kontaktlinsen verwendet werden.

Anwendungsanleitung:

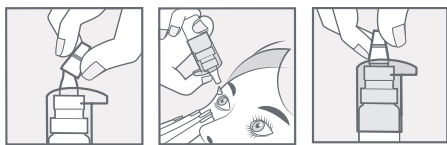

Träufeln Sie 1 bis 2 Tropfen pro Auge, einmal oder mehrmals täglich, nach Bedarf oder gemäss Anweisung eines Arztes, Apothekers oder Drogisten, bzw. einer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin ein.

Kontaktlinsenträger träufeln vor oder nach dem Gebrauch 2 bis 3 Tropfen auf die Linse (mehrmals täglich oder nach Bedarf auf die getragene Linse träufeln). Entsorgen Sie das Produkt gemäss den örtlichen Vorgaben.

Warnhinweise:

- bei Augenirritationen die Anwendung des Produkts stoppen und einen Arzt, Apotheker oder Drogisten, bzw. eine Ärztin, Apothekerin oder Drogistin kontaktieren
- das Produkt nicht bei Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe verwenden
- von Wärmequellen fernhalten, an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C lagern
- außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- nicht schlucken
- das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden
- innerhalb von 6 Monaten nach dem ersten Öffnen verwenden
- das Produkt nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt erscheint
- die Spitze der Flasche nicht das Auge oder Augenlid berühren lassen
- die Flasche nach jedem Gebrauch fest verschließen
- das Produkt mindestens 5 Minuten vor oder nach Gebrauch anderer äusserlich anzuwendender Augenprodukte verwenden

Zusammensetzung:

Natriumhyaluronat 0,1 %, Flüssigextrakt aus Blaubeeren (*Vaccinium myrtillus L.*) 0,5 %, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, auf pH 7.2 gepufferte isotonische Lösung.

Enthält kein(e):

Benzalkoniumchlorid, Chlorhexidin, Parabene, Phenoxyethanol, Thimerosal und Bestandteile tierischen Ursprungs.



Distributor:

Similasan Nederland B.V.
Toernooveld 200
6525 EC Nijmegen
Netherlands
www.mysimilasan.com


Similasan
Tired Eye


- Protects the eyes in case of stress due to intensive screen use
- In case of stressed, tired and burning eyes due to intensive screen use
- With 0.1% hyaluronic acid and 0.5% blueberry extract of natural origin
- Suitable for contact lens wearers
- Preservative free

Similasan Tired Eye eye drops protect the eyes in case of stress due to intensive screen use. The eye drops relieve symptoms such as stressed, tired, dry or burning eyes caused by extended exposure to blue light emitted by digital devices such as mobile phones, tablets or computer screens.

Indications:

- ideal in case of ocular stress caused by extended computer use, blue light exposure, unfavorable lighting conditions or night driving
- daily lubrication and moisturisation of dry and tired eyes due to intensive screen use
- protects the eye and stabilizes the tear film in case of oxidative stress and accumulation of free radicals on the ocular surface
- suitable for use while wearing contact lenses.

Instructions for use:

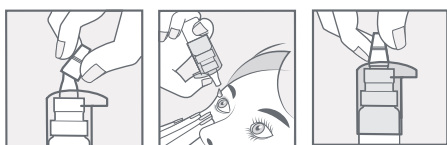

Instil 1 to 2 drops per eye, one or more times a day, as needed or as per your doctor's, pharmacist's or druggist's advice.

For contact lens users, instil 2 to 3 drops on the worn lens before or after use (instil drops on the worn lens, many times a day or as needed). Dispose according to the local laws.

Warnings:

- in case of eye irritation, stop using the product and contact a doctor, pharmacist or druggist
- do not use in case of allergy or hypersensitivity to any of the product components
- keep away from heat sources, store in a dry place at temperatures between 5 and 35 °C
- keep out of the reach of children
- do not swallow
- do not use the product after the expiry date
- use within 6 months of first opening
- do not use the product if the bottle appears damaged
- do not let the tip of the bottle touch your eye or eyelid
- close the bottle firmly after each use
- administer the product at least 5 minutes before or after the administration of other topical ophthalmic products.

Composition:

Sodium hyaluronate 0.1%, blueberry (*Vaccinium myrtillus L.*) fluid extract 0.5%, disodium edetate, isotonic solution buffered to pH 7.2.

Does not contain:

Benzalkonium chloride, chlorhexidine, parabens, phenoxyethanol, thimerosal and components from animal origin.




Distributor:

Similasan Nederland B.V., Toernooveld 200
6525 EC Nijmegen, Netherlands
www.mysimilasan.com

 **Omisan farmaceutici** 
via Galilei, Guidonia M. (RM) - Italy 0051
www.omisan.com

MD

Medisch hulpmiddel
Dispositif médical
Medizinprodukt
Medical device

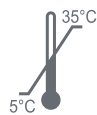

STERILE A

V1.1 B5NL2480
F931 Rev.22/02/23